

UMONIUM³⁸

INSTRUMENTS



✓ FORMULE ZONDER

- CMR-COMPONENT**
- HORMOONONTREGELAAR

“ Niet-corrosief reinigings- en
desinfectiemiddel ”



UMONIUM³⁸ INSTRUMENTS weekt organisch vuil los en zorgt voor een desinfectie met een breed werkingsspectrum van het behandelde materiaal. Deze snel werkende inwekoplossing verwijdert in een realistische contacttijd de meest resistente stammen van ziekenhuiskiemmen. Dit uitstekende product garandeert een ultra efficiënte desinfectie en glanzend schone medische en chirurgische instrumentatie. Het geeft geen giftige dampen af en bevat geen hormoonontregelaars. Zonder gevaar voor corrosie van de instrumenten.

** Carcinogeen, mutageen of reprotoxisch

 **laboratoire
HUCKERT'S**
INTERNATIONAL
mastered disinfection





UMONIUM³⁸ INSTRUMENTS

1 l concentraat geeft 200L
verdunde oplossing (0,5%).



✓ **FORMULE ZONDER**
→ CMR-COMPONENT**
→ HORMOONONTREGELAAR

INDICATIES

Reiniging en desinfectie van invasieve medische hulpmiddelen vóór sterilisatie.

SAMENSTELLING

N-benzyl-N-dodecyl-N, N-dimethyl-ammonium chloride/N-benzyl-N, N-dimethyl-N-tetradecyl-ammonium chloride. 99g/l.

NORMatieve STANDaARDEN

- In overeenstemming met DE 93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen (bijlage II, excl. §4)
- Kwaliteit en traceerbaarheid gegarandeerd door ISO 9001:2015 en ISO 13485:2016.
- CE-markering 1639

GEbruIKSAANWIJZING

Reiniging/Pre-desinfectie Een oplossing van 0,5% (25 ml/5 l water*) gebruiken. Onderdompelen. De hulpmiddelen borstelen of een ultrasoonbad gebruiken om alle vuil te verwijderen. Grondig spoelen met water*.

Desinfectie: een oplossing van 2,5% (25 ml/l water*) gebruiken op schone hulpmiddelen. Een minimale onderdompeltijd van 10 minuten respecteren. Grondig spoelen met water*.

UMONIUM³⁸ INSTRUMENTS is geen vervanging voor de sterilisatieprocedure.


EIGENSCHAPPEN

- Medisch hulpmiddel Klasse IIb
- Reinigings- en desinfectiemiddel met een breed werkingsspectrum
- Niet toxisch, geen gevaarlijke dampen
- LD₅₀ (rat): 5840 mg/kg
- Niet corrosief: pH-neutraal
- Opgelost product irriteert de huid niet (geen transdermale toxiciteit)
- Zonder aldehyde, peroxyde, biguanide of andere carcinogene, mutagene of reprotoxische stoffen
- Stolt niet
- Niet ontvlambaar
- Bactericide, fungicide, mycobactericide en virucide
- 100% compatibel met optische vezel, rubber, polycarbonaat, acrylstoffen, glas, Pyrex, PU, PVC, HDPE, PET, neopreen, latex, silicone, verven, roestvrij staal 410
- Doeltreffend, snel en krachtig (lost bloed op)
- Doeltreffend in aanwezigheid van organische materialen
- Desinfectiesnelheid: 10 min.
- Zonder residu na spoeling
- Stabiliteit: 36 maanden na productiedatum

GEbruIKSPROCEDURE

STAP 1 : REINIGING/PRE-DESINFECTIE

→ Een bad per gebruik

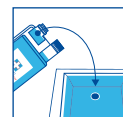

Een oplossing van 0,5% (25 ml/5 l water*) gebruiken




Onderdompelen en vervolgens borstelen of een ultrasoonbad gebruiken om alle vuil te verwijderen



Grondig spoelen met water*

STAP 2 : DESINFECTIE

→ Gebruik het bad tot de vloestof troebel wordt

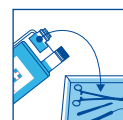

Een oplossing van 2,5% (25 ml/L water*) gebruiken



Minimale onderdompeltijd van 10 minuten



Grondig spoelen met water*

TECHNISCHE GEGEVENS

Normen	Doelorganismen	Contacttijd (min.) bij 2,5%	
		Propere toestand	Vuile toestand
EN 13727	<i>S. aureus</i> <i>E. hirae</i> <i>P. aeruginosa</i>	1	10
EN 13697	<i>S. aureus</i> <i>E. hirae</i> <i>E. coli</i> <i>P. aeruginosa</i> <i>S. typhimurium</i> <i>E. cloacae</i> <i>L. Brevis</i>	15	15
EN 14561	<i>S. aureus</i> <i>E. hirae</i> <i>P. aeruginosa</i>	15	30
EN 13624	<i>C. albicans</i>	10	10
EN 13697	<i>C. albicans</i> <i>A. niger</i>	15	15
EN 14562	<i>C. albicans</i> <i>A. niger</i>	10	10
EN 14476	Norovirus Adenovirus Poliovirus Vacciniavirus	10	10
EN 14348	<i>M. avium</i> <i>M. terrae</i>	10	10
EN 14563	<i>M. avium</i> <i>M. terrae</i>	10	10



ARTIKELNR.	BENAMING	DOOS
PF 12115	Easydose 25 ml	2 x 50 stuk
PF 12110	Doseerflacon 1 l	12 x 1 liter
PF 12112	Bidon van 5 liter met pomp	4 x 5 liter
PF 12153	Doseerflacon 125 ml	24 x 125 ml
EMB 0013	Pomp ECONOMATIC volledige set - Dosering 0,5%	1 stuk
EMB 0013 - 2,5%	Pomp ECONOMATIC volledige set - Dosering 2,5%	1 stuk

* Kraanwater op kamertemperatuur

** Carcinogeen, mutageen of reprotoxisch

FP00031 NL - Ed. 3.5 - 08/2024 - Productfoto's niet contractueel



UMONIUM³⁸ is een gedeponeerd merk van Laboratoire Huckert's International