

Afin de réduire l'impact environnemental, d'optimiser le transport et de limiter les coûts logistiques, l'assistant muet OP600008 OPTIMA est proposé en conception éco-optimisée livrée en éléments assemblables.



Cette conception permet **un emballage compact et optimisé**, réduisant le volume transporté et les émissions associées, tout en conservant la **robustesse et la stabilité d'un assistant monobloc une fois assemblé**.

Le montage est **simple et rapide**, grâce aux vis et à la clé Allen fournies.

Structure en acier inoxydable

Résistance élevée à la corrosion, aux produits désinfectants et à l'usage intensif en milieu vétérinaire.

Piètement tripode stable

Excellente stabilité grâce à une répartition optimale des appuis, adaptée aux manipulations quotidiennes.

Hauteur réglable ergonomique

Ajustement simple et rapide pour un confort de travail optimal.

Mobilité fluide et sécurisée

Roulettes pivotantes et plateau avec rebords pour un déplacement facile et une utilisation en toute sécurité.



Dans le carton, vous trouverez :

- 1 **montant principal** avec une équerre gravée avec le logo (montant percé pour molette)
- 1 **tube interne** (réglage de la hauteur qui viendra s'insérer dans le montant principal)
- 1 **montant supérieur avec extrémité coudée en équerre** (4 trous) pour fixation sous plateau (alignement avec les supports du plateau)
- 1 **pied tripode** avec 3 axes pour roulettes
- 1 **plateau inox** avec rebords et cadre de renfort
- 3 **roulettes** qui viennent se fixer au bout de chaque branche de la base.



Dans le sachet en plastique :

- 1 **molette de serrage** qui permet de régler la hauteur télescopique du plateau
- 3 **vis Inox à tête ronde** qui servent à solidariser le haut du pied au cadre sous le plateau
- 1 **clé Allen** qui vous servira à bloquer les vis de structure de façon définitive

Fixation du montant supérieur au plateau :

1. Sortez **2 vis à tête ronde** ainsi que la **clé Allen** du sachet.
2. Prenez le **montant supérieur avec extrémité coudée en équerre** (4 trous).
3. Le **plateau à rebord** est à l'envers dans le carton de manière à accéder aux renforts situés en dessous.
4. **Positionnez le montant coudé**, en orientant la partie avec la longue encoche vers les trous du plateau. Veillez à ce que **les trous de plus grand diamètre soient orientés vers l'extérieur (côté opposé au centre du plateau)**.
5. Ajustez afin que **les trous du montant** soient bien alignés avec ceux du plateau.
6. Insérez les vis puis serrez à l'aide de la clé Allen.



Montant supérieur avec extrémité coudée en équerre



Ne pas serrer complètement avant d'avoir vérifié l'alignement.



Positionnement des roulettes :


1. Écartez le plateau de la zone de montage, puis retirez le papier bulle protégeant le pied tripode (3 axes pour roulettes).
2. Prenez une roulette et positionnez-la face à l'axe avec la **vis proéminente**.
3. Enfoncez la roulette sur l'axe.
4. **Appuyez fermement** jusqu'à enclenchement complet. Un **léger "clik"** doit être entendu, indiquant que la roulette est correctement fixée.
5. Répétez l'opération pour les deux autres roulettes.




Vérifiez que chaque roulette est bien maintenue et tourne librement avant utilisation.

Fixation du montant principal au pied tripode :

1. Prenez le **montant principal avec équerre gravée** (logo) et perçage pour molette.
2. **Retournez le pied tripode** équipé des roulettes.
3. **Insérez le montant principal dans l'encoche de fixation du pied** (repère : forme ronde avec deux encoches latérales), en orientant l'équerre avec le logo vers le bas.
4. **Introduisez la vis par le dessous** afin de solidariser le montant avec le pied.
5. Maintenez le montant en position pendant le vissage pour assurer un bon alignement.
6. **Retournez l'ensemble**, puis terminez le serrage à l'aide de la clé Allen.

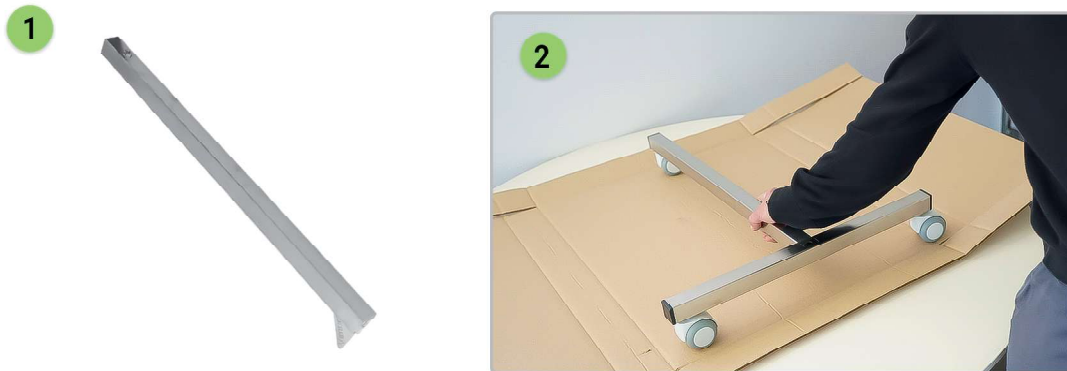


Vérifiez que le montant est bien engagé à fond dans son logement avant de serrer.

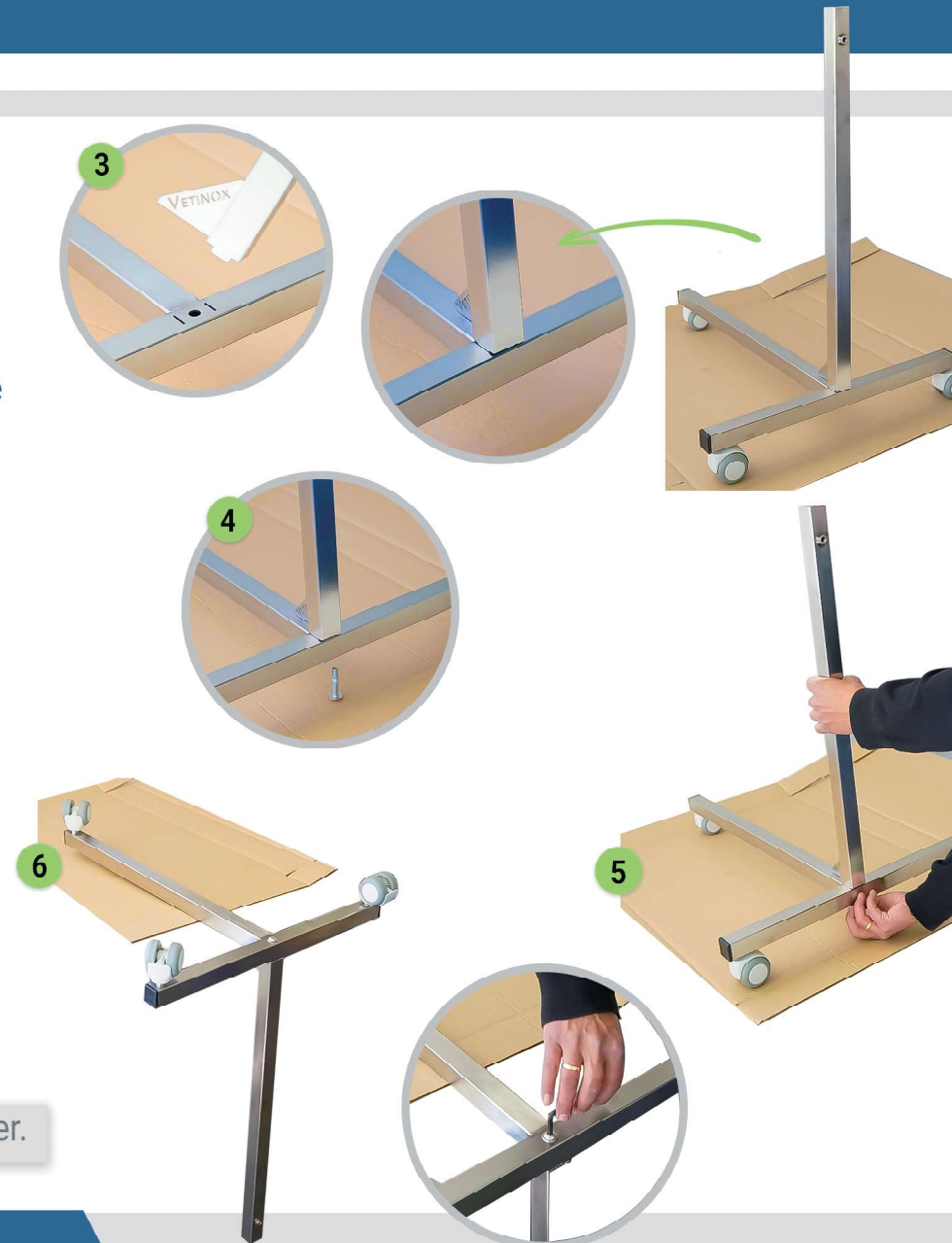

Fixation de la molette de serrage :

1. Remettez l'ensemble à l'endroit sur la surface de montage.
2. Prenez la molette de serrage.
3. Insérez la molette dans l'orifice situé en haut du montant principal (équerre avec logo).
4. Vissez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à mise en place.

À cette étape, le pied tripode est entièrement assemblé.

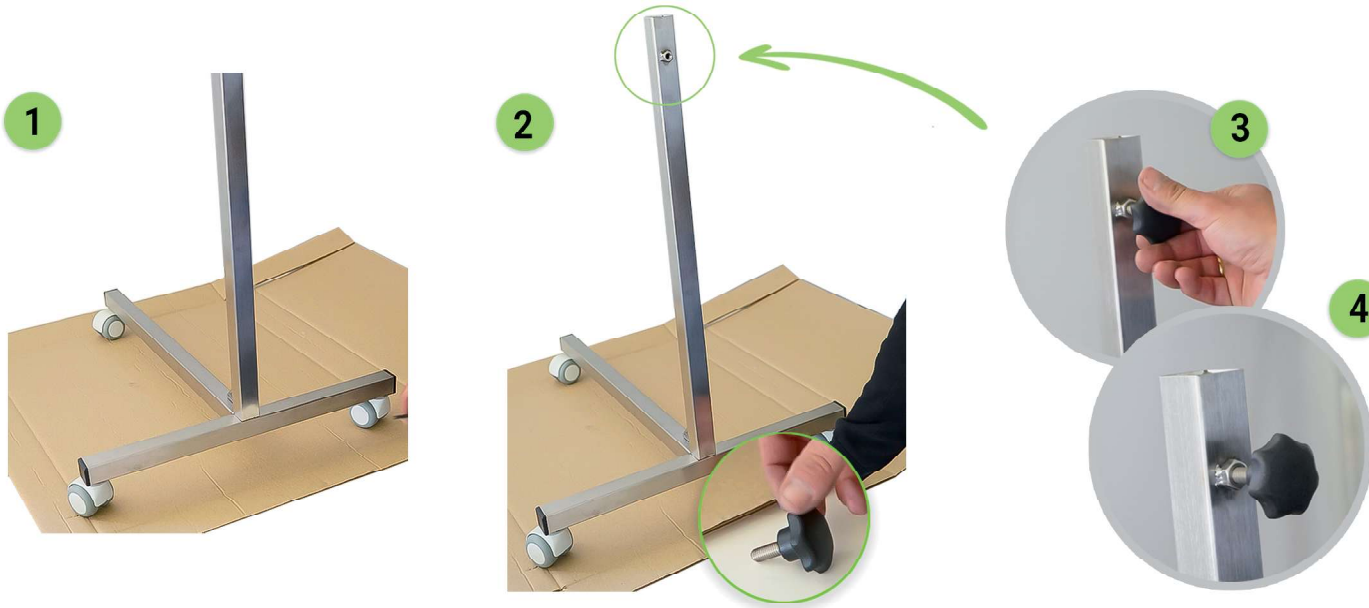

Ne pas serrer complètement à ce stade afin de permettre le réglage de la hauteur ultérieurement.

Assemblage final et réglage de la hauteur :

1. Insérez le **tube supérieur** (support du plateau) dans le **montant principal**.
2. Faites **coulisser le tube pour ajuster la hauteur du plateau** selon votre besoin. Maintenez le plateau pendant cette manipulation afin d'éviter tout basculement.
3. **Alignez correctement les éléments** pour que le plateau soit bien droit.
4. **Serrez la molette de serrage jusqu'à blocage du tube**. Ne pas forcer excessivement afin de préserver le système de réglage.

Vérifiez que le plateau est bien horizontal, stable et correctement maintenu

Si nécessaire, ajustez à nouveau la hauteur puis resserrez la molette.

Votre assistant muet est désormais prêt à l'emploi.

