

Afin de réduire l'impact environnemental, d'optimiser le transport et de limiter les coûts logistiques, la table de consultation OP300000 est proposée en conception éco-optimisée livrée en éléments assemblables.

Cette conception permet un emballage compact, moins volumineux, générant moins d'émissions liées au transport, tout en conservant la robustesse et la stabilité d'une table monobloc une fois assemblée.

Le montage est ultrasimple et très rapide grâce aux vis et à la clef Allen fournis avec la table.

Structure en acier inoxydable


Résistance élevée à la corrosion, aux produits désinfectants et à l'usage intensif en milieu vétérinaire.

Châssis renforcé avec barre transversale

Excellente stabilité latérale, même lors de manipulations d'animaux lourds ou agités.


Assemblage mécanique sécurisé

Tubes filetés intégrés permettant un vissage précis, durable et sans jeu dans le temps.

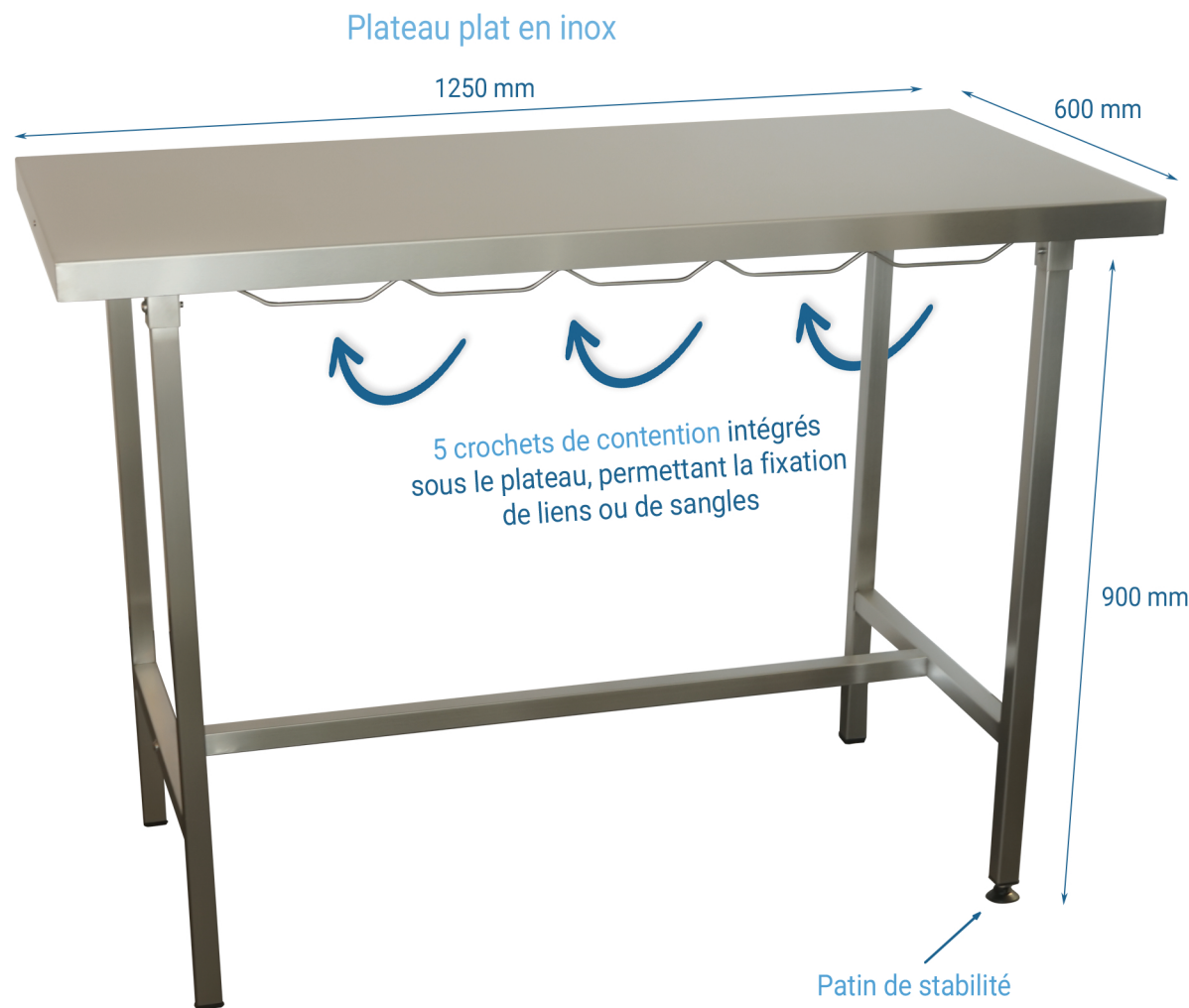

Dans le carton, vous trouverez :

- 1 plateau plat en inox (livré couché, face inox vers le bas),
- 2 montants latéraux (châssis de pieds),
- 1 barre transversale de renfort,
- 6 vis de fixation (dont 2 latérales),
- 1 clé Allen unique pour toutes les vis.

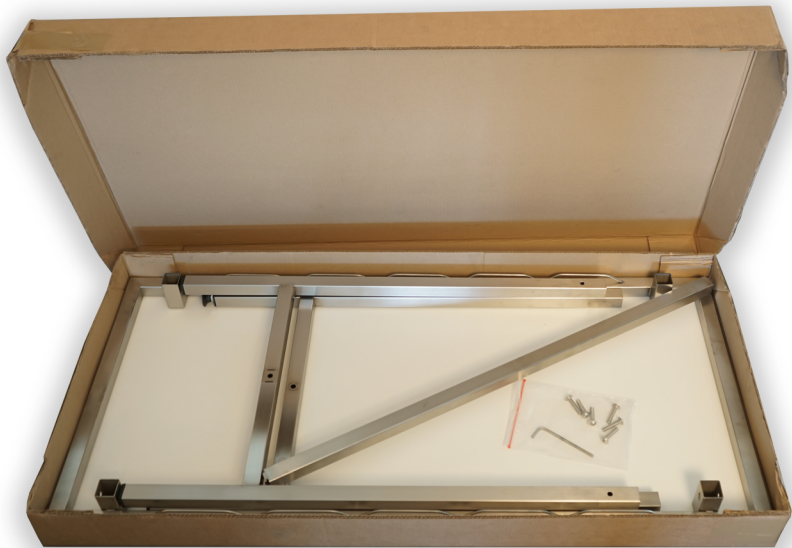

Instructions de montage :

Montage recommandé directement dans le carton, table à l'envers

1. Préparation

Ouvrez le carton et laissez le plateau inox à l'intérieur, positionné à l'envers.

Sortez uniquement :


- les deux montants latéraux,
- la barre transversale,
- les vis et la clé Allen.

Cette méthode permet d'éviter toute rayure et facilite l'assemblage.



2. Mise en place des montants :

- Positionnez les deux montants de table de chaque côté du plateau.
- **Introduisez les extrémités des montants dans les cavités prévues sous le plateau.**
- Les tubes carrés sont ébavurés et ajustés, l'assemblage doit se faire sans forcer.
- Vérifiez que chaque montant est correctement emboîté.

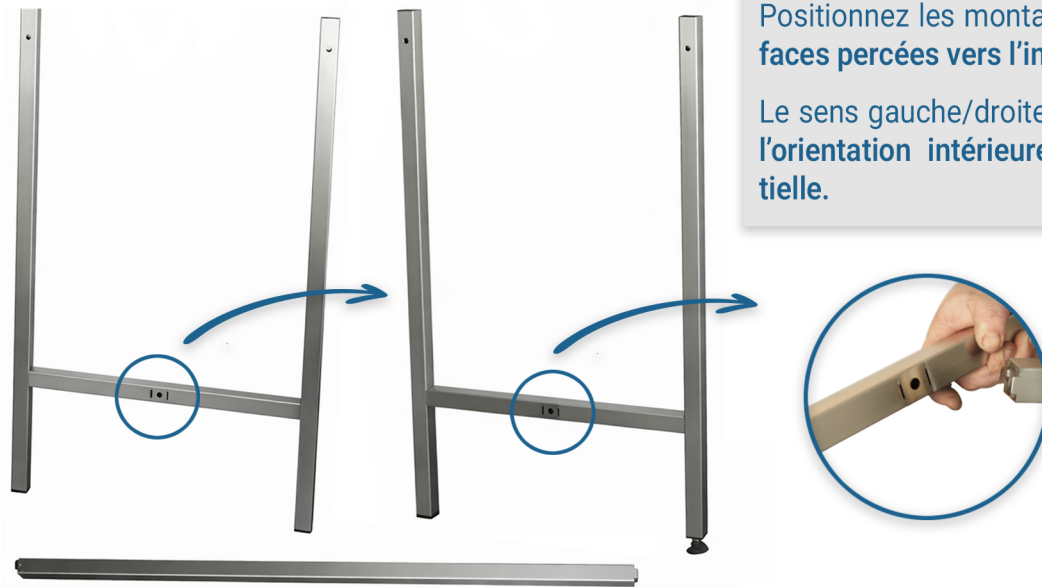


Barre transversale

Positionnez les montants en veillant à **orienter les faces percées vers l'intérieur de la structure.**

Le sens gauche/droite n'a pas d'importance, seule l'**orientation intérieure des perçages** est essentielle.



Introduisez les extrémités du premier montant dans les cavités

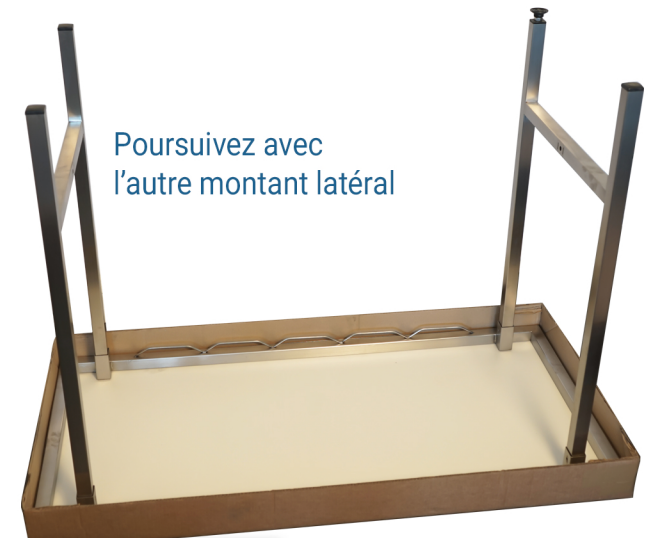


Poursuivez avec l'autre montant latéral

3. Installation de la barre transversale


Placez la barre transversale entre les deux montants.

Une fois la barre positionnée :

- Alignez les perçages,
- Insérez **les 2 vis latérales** pour fixer la barre transversale aux montants.
- Les **tubes sont filetés à l'entrée et à la sortie**, ce qui guide naturellement les vis et garantit un maintien solide et durable.

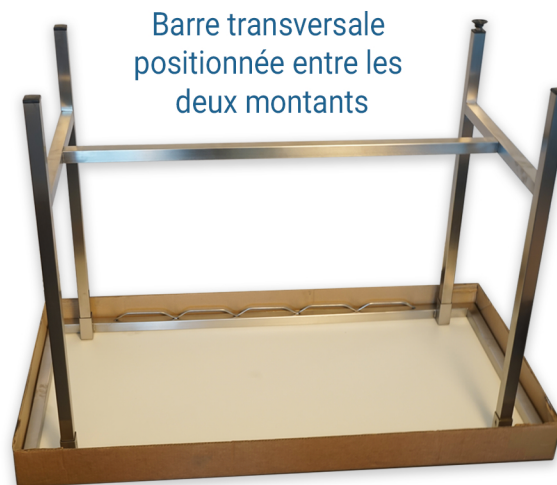

Barre transversale
positionnée entre les
deux montants

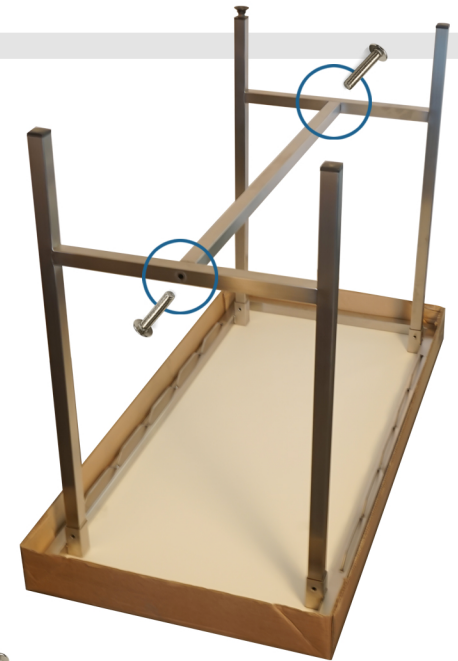

2 vis latérales à insérer




4. Finalisation du montage

Insérez ensuite les **4 vis restantes** au niveau des **points de fixation** situés sous le plateau afin de solidariser définitivement :

- le plateau inox,
- le châssis de la table.

Serrez fermement à l'aide de la **clé Allen** fournie.

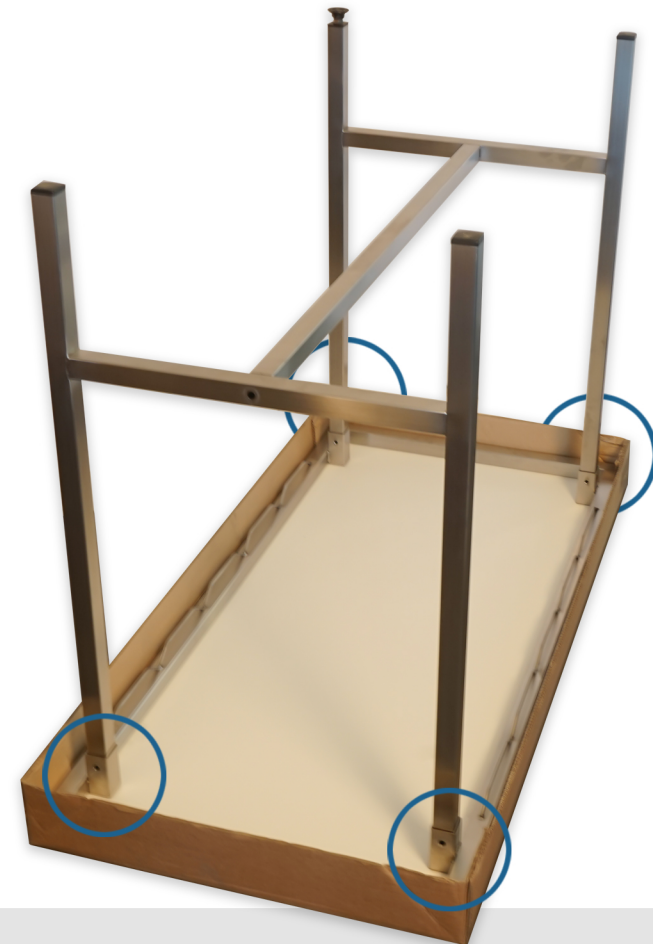


5. Mise en place de la table

La table est maintenant entièrement montée.

Il ne reste plus qu'à :

- sortir la table du carton,
- la retourner délicatement,
- la positionner à son emplacement définitif,
- si nécessaire, ajuster le patin de stabilité.

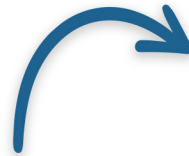

Votre table est prête !

