

Afin de réduire l'impact environnemental, d'optimiser le transport et de limiter les coûts logistiques, la **table pont chirurgicale à hauteur variable OP110100 OPTIMA** est proposée en conception éco-optimisée livrée en éléments assemblables.



Cette conception permet **un emballage compact et optimisé**, réduisant le volume transporté et les émissions associées, tout en conservant la **robustesse et la stabilité d'une table pont chirurgicale monobloc une fois assemblée**.

Le montage est **simple et rapide**, grâce aux vis et à la clé Allen fournies.

Surface de travail sécurisée

Plateau inox avec rebords (825 x 495 mm) pour éviter toute chute d'instruments pendant l'intervention.

Hauteur réglable avec précision


Ajustement simple de 820 mm à 1440 mm pour s'adapter à toutes les configurations de bloc et à la hauteur de la table de chirurgie.

Mobilité maîtrisée

Roulettes robustes avec freins intégrés pour un déplacement fluide et une immobilisation parfaite en phase opératoire.

Structure stable et durable

Conception en inox adaptée aux environnements médicaux exigeants (hygiène, résistance, longévité).

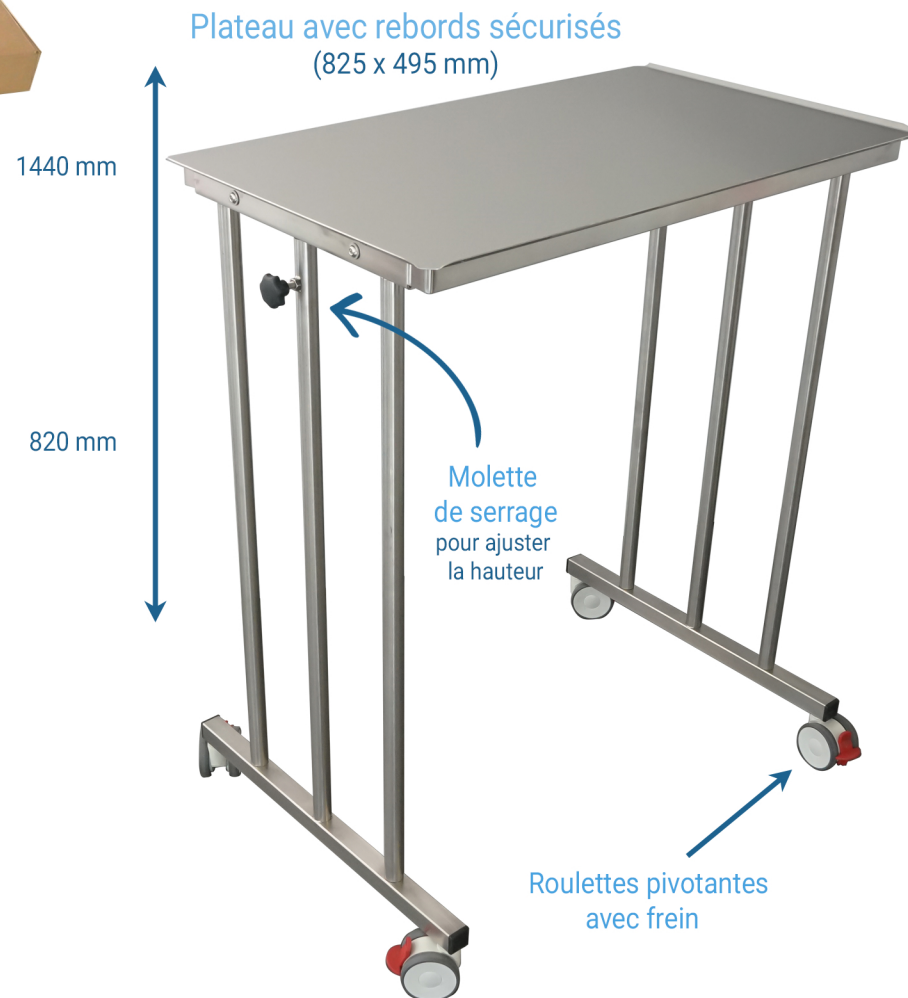

Dans le carton, vous trouverez :

- 1 plateau inox avec rebords, équipé d'un cadre de renfort
- 2 montants latéraux (structures composées de trois tubes)
- 2 montants supérieurs avec roulettes (parties mobiles s'insérant dans les montants latéraux)




Dans le sachet d'accessoires :



- 2 molettes de serrage permettant de régler la hauteur télescopique
- 4 vis Inox à tête ronde pour la fixation des montants latéraux au plateau
- 1 clé Allen pour le serrage des vis de fixation

Fixation des montants latéraux :

- 1. Positionner le plateau :** Placez le plateau à l'envers sur une surface plane (le dessous étant orienté vers vous).
- 2. Mettre en place les montants :** Positionnez les deux montants latéraux (structures composées de trois tubes) de chaque côté du plateau.
- 3. Aligner les perçages :** Alignez soigneusement les trous des montants avec ceux des tubes de renfort situés sous le plateau.
- 4. Fixation :** Insérez les 4 vis à tête ronde dans les trous prévus à cet effet, puis vissez à l'aide de la clé Allen afin de solidariser les montants au plateau.

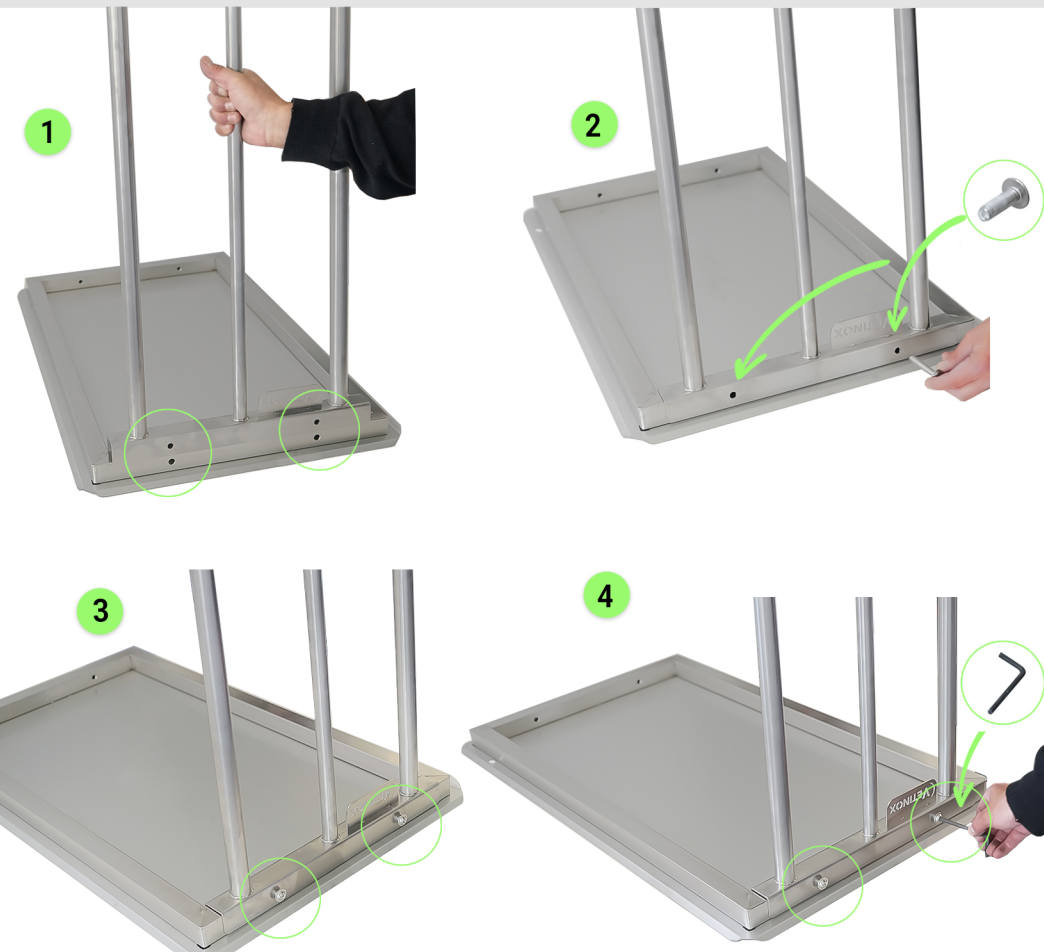

Veillez à ne pas serrer complètement les vis avant d'avoir positionné l'ensemble des fixations.

Assemblage de la structure mobile :

1. Répétez l'opération pour le second montant latéral en respectant les mêmes étapes : positionnement, alignement des trous, puis fixation avec les vis.
2. Préparer le montant supérieur : prenez le montant équipé de trois tubes avec roulettes (partie mobile avec freins rouges).
3. Installer la molette de réglage : Insérez la molette de serrage dans l'orifice prévu sur le tube central du montant.
4. Assembler les deux parties : positionnez ce montant au-dessus de la structure déjà fixée, puis insérez les trois tubes dans les tubes correspondants situés sur les montants inférieurs.
5. Ajustement : faites coulisser l'ensemble jusqu'à la hauteur souhaitée, puis serrez la molette pour verrouiller la position.



Vérifiez que les trois tubes sont bien engagés simultanément avant de serrer la molette.

Installation du second montant supérieur :

Répétez l'opération avec le second montant supérieur équipé de roulettes

1. Insérez les trois tubes dans la structure inférieure
2. Ajustez la hauteur selon vos besoins
3. Serrez la molette pour verrouiller la position
4. Redressez la table en position d'utilisation

La table est maintenant prête à être utilisée.

Vérifiez que le montant est bien engagé à fond dans son logement avant de serrer.

