


# GÉNIA CLEAN


DÉTACHANT IODE INSTANTANÉ




injection

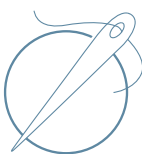

chirurgie

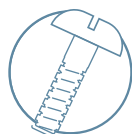

orthopédie

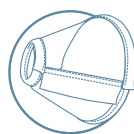

hospitalisation



capture



protection



hygiène



rurale

## génia

## GÉNIA CLEAN DÉTACHANT IODE INSTANTANÉ

**NOUVEAU  
FORMAT**

**POUR  
TEXTILES OU  
SURFACES  
DURES**



**Solution prête à l'emploi pour le nettoyage instantané des taches d'iode et du Lugol.**

- Elimination de tout type de traces d'iode, fraîches ou anciennes.
- Compatible avec tous types de surfaces : sols, textiles, matériels et équipements médicaux.
- Sans colorant et sans parfum.
- Utilisation possible en machine à laver.

*Utilisez les produits avec précaution. Avant utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.*

### INSTRUMENTATION ET SURFACES

| Code                                        | Modèle       |
|---------------------------------------------|--------------|
| 317413                                      | Spray 750 mL |
| <b>Surconditionnement :</b><br>carton de 12 |              |

## MODE D'EMPLOI

1. **Pulvériser** Genia Clean® Détachant Iode Instantané sur la zone tâchée.
2. Laisser agir **jusqu'à disparition de la tache**.
3. Renouveler si nécessaire.
4. Surface dure : **essuyer** et **rincer** la zone traitée. Surface textile : **rincer** la zone traitée.

## CARACTÉRISTIQUES

| COMPOSITION                                 | CARACTÉRISTIQUES                                                                                                                 | PRÉCAUTIONS                                                                                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Thiosulfate de sodium, agents stabilisants. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• pH : 7,3 - 8,3</li> <li>• Parfum : Non parfumé</li> <li>• Couleur : Incolore</li> </ul> | Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.<br><b>UFI : H8C9-G09R-800F-N6JK</b> |



**HYGIÈNE**